

Thank you for choosing Juzo, an international leader in medical compression garments since 1912.

Manufactured with care and detail, your Juzo Compression Wrap has several features that provide therapy, comfort, versatility and superior fit, including:

- Working pressure - Short stretch for a high working pressure.
- Gap resistant - Special notches and minimal overlying straps resist gapping and bulk.
- EZ pull tab - Aid for hassle free application.
- Reversible - Worn in either beige or black

Included In This Package:

- Juzo Compression Wrap
- Juzo Hook Fasteners

Care and Maintenance

- Remove all the half circle hook fasteners from the straps
- Machine wash warm
- A garment bag is strongly recommended
- Tumble dry low
- DO NOT USE: bleach, chlorine, fabric softeners, or other laundry additives
- Store garments in a dry place at room temperature

Return Policy

Should it be necessary to return your garment for evaluation, Juzo requires that the garment be laundered (for hygienic reasons) prior to returning to the original place of purchase.

Fabric

100 % Nylon / 100% Neoprene
Not made with natural rubber latex.

Instructions for Use

It is recommended that you consult with your medical professional and fitter for proper guidelines on the use and application of this product. If you experience any discomfort, immediately remove the short-stretch compression wrap and consult with your medical professional.

- Juzo Compression Wrap is designed to be reversible. The half circle hook fasteners need to be attached to the garment on the opposing side of the color to be worn.

Indications

Primary & secondary varices, chronic venous insufficiency, post-thrombotic syndrome, venous stasis ulcers, pre and post-vein procedure and lymphatic edema.

Contraindications

Absolute: peripheral arterial disease, decompensated heart diseases, septic phlebitis, phlegmasia coerulea dolens.

Relative: Leg infection, intolerance to compression or garment fabric, sensory disturbance to the limb.

Cautions

No side effects are currently known. However, if a negative result should occur (i.e. skin irritations) from the use of our products, please discontinue use of the garment and consult with a medical professional. The manufacturer is not liable for damage/injuries which have been caused by improper handling or misuse.

Steps to Putting on the Thigh Wrap

1. The Thigh wrap should be donned after putting the Knee Wrap segment on the leg.
2. Attach the hook fasteners to the straps on the side opposite of the color to be worn. For example, if beige is the desired color, then the fasteners should be applied to the black side of the garment.
3. Gently fold the lower two fasteners over onto themselves to prevent the fasteners from inadvertently attaching to the garment. Each fastener can then be unfolded before attaching.
4. While in the standing position the bottom of the thigh wrap should overlap the top portion of the knee wrap.
5. Secure the top strap of the thigh wrap by counter pulling the top strap and the top EZ Pull at the same time. The strap should be just tight enough to gently hug the thigh and hold the garment in place.
6. Fasten the middle strap by simultaneously counter pulling the middle and lower strap until the middle strap gently hugs the leg.
7. Fasten the lower strap by simultaneously counter pulling the lower strap and the EZ Pull until the strap gently hugs the leg.
8. Repeat steps 5-7 pulling each strap until they are comfortably snug. Each strap should slightly overlap the strap above it using the notches built into the end of the strap nearest the main body of the garment.
9. The wrap should have a snug fit but not be painfully tight. If you feel any pain or discomfort or the wrap feels too loose, then repeat steps 6 through 8, adjusting the level of tension that is applied.

Note: See care and application directions for use of Juzo Compression Wrap Knee, Calf & Foot Segment.
Extra fasteners are provided inside packaging.

JUZO COMPRESSION WRAP

Short Stretch Compression Wrap

Venda de compresión de elasticidad reducida
Bandage compressif à extensibilité courte

- High Working Pressure
- EZ Pull Tabs

REVERSIBLE


beige or black garment

Freedom in Motion



For over 100 years, our family philosophy has been that medical garments should not inhibit a person's lifestyle.
Venda de compresión de elasticidad reducida para piernas saludables y siempre en movimiento.
Bandage compressif à extensibilité courte pour aider à améliorer la circulation et garder les jambes en bonne santé et en mouvement.
Please Recycle
Printed in USA
INTHIGHWRAP-0871

GARMENT CONTENTS & CARE
See inside of insert for material contents & proper care.

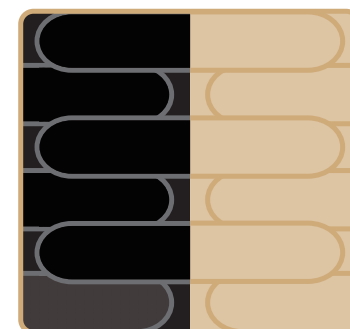

REVERSIBLE
beige garment or black garment

Manufactured By
Julus Zorn, Inc • PO Box 1088
Cuyahoga Falls, OH 44223
Distributed by Juzo USA
www.juzousa.com
Distributed by Juzo Canada LTD.
www.juzo.ca

The Juzo Compression Wrap will offer a varying degree of pressure that is dependent on the tension of the garment and the position and activity level of the wearer.

Size Chart For Juzo® Compression Thigh Wrap
Note: This size chart is not intended to replace a professional fitting by a qualified fitter.

	S	M	L	XL	2XL
F	35-55 cm 13 3/4"-21 3/4"	48-70 cm 19"-27 1/2"	60-82 cm 23 1/2"-32 1/4"	70-92 cm 27 1/2"-36 1/4"	80-102 cm 31 1/2"-40 1/4"
G	43-70 cm 17"-27 1/2"	54-81 cm 21 1/8"-32"	65-92 cm 25 1/4"-36 1/4"	75-102 cm 29 1/2"-40 1/4"	85-112 cm 33 1/2"-44 1/4"

psz-01-56

- High Working Pressure: Short stretch for a high working pressure
- Gap Resistant: Special notches and minimal overlying straps resist gapping and bulk
- EZ Pull Tabs: Pull tab aid for hassle-free application
- Made in the USA: Juzo Compression Wraps are made in the U.S.A.

The Juzo CompressionWrap™ is an effective and easier-to-use alternative to bandaging. The versatile wrap delivers therapeutic compression and increased working pressure to improve your quality of life.

Versatile and effective therapy.



Gracias por elegir Juzo, líder internacional en productos de compresión desde 1912.

Fabricado con cuidado y atención en los detalles, el vendaje de compresión Juzo cuenta con diversas características que proporcionan terapia, confort, versatilidad y ajuste superior, como por ejemplo:

- Presión de trabajo: elasticidad reducida para una alta presión de trabajo.
- Resistente a hendiduras: ranuras especiales y mínimas tiras superpuestas que resisten hendiduras y bultos.
- Lengüeta (E-Z Pull Tab): ayuda a lograr una aplicación sin inconvenientes.
- Reversible: se puede usar del lado beige o negro.

El paquete incluye lo siguiente:

- Vendaje de compresión Juzo
- Ganchos sujetadores Juzo

Cuidado y mantenimiento

- Retire todos los ganchos sujetadores con forma de semicírculo de las tiras.
- Lave a máquina con agua tibia.
- Se recomienda usar una funda para ropa.
- Seque a máquina a baja temperatura.
- NO USE: lavandina, cloro, suavizante para ropa ni otros aditivos de lavandería.
- Guarde las prendas en un lugar seco a temperatura ambiente.

Política de devolución

En caso de que sea necesario devolver la prenda para su evaluación, Juzo exige que esta se lave (por motivos de higiene) antes de su devolución al lugar de compra original.

Tela

100 % nylon/100 % neopreno - Sin látex de caucho natural

Instrucciones de uso

Se recomienda consultar con su médico y responsable de realizar los ajustes para conocer las indicaciones apropiadas sobre el uso y la aplicación de este producto. Si experimenta algún tipo de molestia, retire el vendaje de compresión de elasticidad reducida de inmediato y consulte con su médico.

- El vendaje de compresión Juzo está diseñado para ser reversible. Los ganchos en forma de semicírculo se deben sujetar a la prenda del lado opuesto al color que se va a usar.

Indicaciones

Várices primarias y secundarias, insuficiencia venosa crónica, síndrome postrombótico, úlceras venosas por estasis, procedimiento pre- y posvenoso, edema linfático.

Contraindicaciones

Absolutas: enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca descompensada, flebitis séptica, flegmasia cerúlea dolorosa.

Relativas: Infección en la pierna, intolerancia a la compresión o al material de la prenda, trastorno sensorial en el miembro.

Precauciones

Actualmente, no se conocen efectos secundarios. Sin embargo, si se produjeran resultados negativos (como irritación cutánea) debido al uso de nuestros productos, suspenda el uso de la prenda y consulte con su médico. El fabricante no es responsable por daños/lesiones causados por el uso indebido o el manejo incorrecto.

Pasos para colocar el vendaje para muslo

1. El vendaje para muslo se debe colocar después de colocar el segmento de venda para rodilla en la pierna.
2. Sujete los ganchos a las tiras del lado opuesto al color que se va a usar. Por ejemplo, si el color elegido es el beige, entonces los ganchos se deben colocar del lado negro de la prenda.
3. Doble los dos ganchos inferiores con cuidado sobre sí mismos para evitar que se adhieran accidentalmente a la prenda. Luego, cada gancho se puede desdoblarse antes de sujetarlo.
4. Parado, la parte inferior del vendaje para muslo debe superponerse con la parte superior del vendaje para rodilla.
5. Ajuste la tira superior del vendaje para muslo jalando de la tira superior y la lengüeta superior simultáneamente en sentido contrario. La tira debe estar lo suficientemente ajustada para ceñir el muslo con suavidad y mantener la prenda en su lugar.
6. Ajuste la tira central jalando de la tira inferior y central simultáneamente en sentido contrario hasta que esta última ciña la pierna con suavidad.
7. Ajuste la tira inferior jalando de la tira inferior y la lengüeta simultáneamente en sentido contrario hasta que la tira ciña la pierna con suavidad.
8. Repita los pasos 5 a 7 jalando de cada tira hasta que se adapte cómodamente. Cada tira debe superponerse levemente con la tira de arriba usando las ranuras en el extremo de la tira más cercana al cuerpo principal de la prenda.
9. El vendaje debe tener un ajuste ceñido pero no provocar dolor. Si siente dolor o molestia, o si las tiras están demasiado flojas, repita los pasos 6 a 8, ajustando el nivel de tensión que se aplica.

Nota: Consulte las instrucciones de cuidado y aplicación para el uso del segmento de vendaje de compresión Juzo para pie, pantorrilla y rodilla. Sujetadores adicionales se proporcionan dentro del empaque.

Merci de choisir Juzo, un chef de file international dans les vêtements de compression médicaux depuis 1912.

Fabriqué avec soin et le souci du détail, votre Bandage Compressif Juzo possède plusieurs caractéristiques qui offrent thérapie, confort, versatilité et ajustement supérieur, notamment :

- Pression de travail - Extensibilité courte pour une haute pression de travail.
- Résiste aux écarts - Des crans spéciaux et une superposition minimale des sangles résistent à la formation d'écarts et de gonflant.
- Tirette EZ - Aide pour une application sans problème.
- Réversible - Porté soit en beige ou en noir

Inclus dans ce paquet :

- Bandage compressif Juzo
- Fermetures à crochets Juzo

Soin et entretien

- Enlever toutes les fermetures à crochets en demi-cercle des sangles
- Laver à la machine à l'eau tiède
- Un sac de vêtements est fortement recommandé
- Séchage par culbutage à basse température
- NE PAS UTILISER : agent de blanchiment, chlore, assouplissants, ou autres additifs de blanchisserie
- Entreposer les vêtements dans un endroit sec à température ambiante

Politique de retour

S'il s'avère nécessaire de retourner votre vêtement pour une inspection, Juzo vous demande de bien le laver (pour des raisons hygiéniques) avant de le retourner au lieu d'achat d'origine.

Tissu

100 % Nylon / 100 % Néoprène. Pas fait de latex en caoutchouc naturel.

Mode d'emploi

Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé et essayeur pour les bonnes directives sur l'utilisation et l'application de ce produit. Si vous ressentez une gêne quelconque, enlevez immédiatement le bandage compressif à extensibilité courte et consultez votre professionnel de la santé.

- Le Bandage compressif Juzo est conçu pour être réversible. Les fermetures à crochets en demi-cercle doivent être attachées au vêtement sur le côté opposé de la couleur à être portée.

Indications

Varices primaires et secondaires, insuffisance veineuse chronique, syndrome post-thrombotique, ulcères de stase veineuse, pré et post procédure veineuse et œdème lymphatique.

Contre-indications

Absolue : maladie artérielle périphérique, cardiopathies décompensées, phlébite septique, phlegmasia cerulea dolens.

Relative : Infection de la jambe, intolérance à la compression ou aux tissus de vêtement, trouble sensoriel du membre.

Mises en garde

Aucun effet secondaire n'est actuellement connu. Toutefois, si un résultat négatif se produirait (c.-à-d. des irritations de la peau) suite à l'utilisation de nos produits, veuillez cesser l'utilisation du vêtement et consultez un professionnel de la santé. Le fabricant n'est pas responsable des dommages /blesures qui ont été causées par une manipulation incorrecte ou une mauvaise utilisation.

Étapes pour mettre le Bandage pour la cuisse

1. Le bandage pour la cuisse doit être placé après avoir mis le segment de Bandage pour le genou sur la jambe.
2. Attachez les fermetures à crochets aux sangles sur le côté opposé de la couleur à être portée. Par exemple, si beige est la couleur désirée, alors les fermetures doivent être appliquées au côté noir du vêtement.
3. Rabattez soigneusement les deux fermetures inférieures sur elles-mêmes pour empêcher que les fermetures s'attachent par inadvertance au vêtement. Chaque fermeture peut être alors dépliée avant d'attacher.
4. En position debout, le bas du bandage pour la cuisse devrait chevaucher la partie supérieure du bandage pour le genou.
5. Attachez bien la sangle supérieure du bandage pour la cuisse en contre-tirant la sangle supérieure et la tirette EZ supérieure en même temps. La sangle doit être juste suffisamment serrée pour mouler délicatement la cuisse et tenir le vêtement en place.
6. Attachez la sangle du milieu en contre-tirant simultanément la sangle centrale et inférieure jusqu'à ce que la sangle centrale enveloppe délicatement la jambe.
7. Attachez la sangle inférieure en contre-tirant simultanément la sangle inférieure et la tirette EZ jusqu'à ce que la sangle enveloppe délicatement la jambe.
8. Répétez les étapes 5 à 7 en tirant sur chaque sangle jusqu'à ce qu'elles soient confortablement ajustées. Chaque sangle devrait légèrement chevaucher la sangle au-dessus de celle-ci en utilisant les encoches intégrées à l'extrémité de la sangle la plus proche du corps principal du vêtement.
9. Le bandage devrait être bien ajusté mais pas douloureusement serré. Si vous ressentez de la douleur ou une gêne ou si le bandage semble trop détendu, alors répétez les étapes 6 à 8, en ajustant le niveau de tension qui est appliqué.

Remarque : Consultez les directives concernant le soin et l'application pour l'utilisation d'un Segment de mollet et pied, genou de Bandage compressif Juzo. Les fixations supplémentaires sont fournies à l'intérieur de l'emballage.